

Manual de Usuario

KANMED[®] BABYBED



Art no: BB100-077 ver 2
2015-08-25

Precaución

Por favor lea este manual cuidadosamente, su uso incorrecto, puede causar daño al paciente o al usuario

Fabricado por:

KANMED AB
www.kanmed.se

Distribuido por:

Este manual es válido para: Cunas BBxxx que tienen tilt de inclinación y/o nuevas paredes laterales con topes rojos. También es válido para cunas donde el tilt de inclinación y las nuevas paredes laterales con topes rojos han sido actualizados.



Contenidos

1. DESCRIPCIÓN GENERAL / USO.....	3
2. ADVERTENCIAS	3
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS	4
4. INSTRUCCIONES GENERALES PARA USO	5
7. RESOLUCIÓN PROBLEMAS.....	10
8. DATOS TÉCNICOS.....	11
9. SECCIÓN TÉCNICA - SERVICIO Y MANTENIMIENTO.....	12
10. PARTES DE REPUESTOS/ACCESSORIOS	14
11. CONDICIONES DE LA GARANTÍA	14
12. GUÍA-LÍNEAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.....	15
13. DESECHABLES	15

BB400



BB100



1 Descripción General/Uso

Descripción General

La Babybed Kanmed esta disponible en 4 versiones:

BB100	Modelos estándar con ajuste de altura eléctrico.
BB300	Mismo anterior pero sin el ajuste de altura eléctrico. (Altura Fija)
BB400	Versión para gemelos con ajuste de altura eléctrico.
BB400F	Mismo anterior pero sin el ajuste de altura eléctrico (Altura Fija)

Uso




El usar el BabyBed de Kanmed es proveer una cama ergonómicamente ideal y segura para prematuros y bebés recién nacidos en ambientes hospitalarios. También esta hecha para ser utilizada con los sistemas BabyWarmer de Kanmed BW3 o BW-50.

Está pensada para ser usada por el personal del hospital o los cuidadores de los bebés de acuerdo a las instrucciones entregadas en este manual y acorde a las rutinas clínicas preestablecidas. Sólo por personal que ha sido capacitado en el uso de la Babybed Kanmed le será permitido utilizar este producto.

2 Advertencias

- No use la BabyBed Kanmed con bebés/niños pequeños que son capaces de moverse porque se pueden caer o trepar fuera de la cama.
- Asegúrese de que todos los paneles están bloqueados en la posición más alta cuando el bebé está desatendido
- No mueva la cama alrededor en posición alta. Siempre use la posición más baja.
- No use las barandas para mover la cama, use siempre los rieles laterales.
- No deje al bebé sin atención con las barandas abajo.
- Respete los límites de peso.
- No coloque equipamiento electrónico en el gabinete bajo la cama
- Revise que la cama no esté tambaleante significando que todas las ruedas y pernos están apretados.
- Asegúrese que no hay gente u objetos en el camino cuando cambia la altura.
- Remueva el arco de la cubierta si la cama va a ser usada sin la cubierta
- El arco de la cubierta es sólo para ser usado con la cubierta (manta)
- Si niños, parientes o paciente, o pacientes con necesidades especiales tienen riesgo de presionar/jugar con el pedal de pie, entonces desconecte la alimentación eléctrica. Asegúrese que el BabyWarmer the Kanmed todavía tiene energía.
- Mantenga una distancia segura de otros productos que pueden moverse hacia arriba y abajo.
- La parte más ancha del colchón es de 40 mm
- Sólo personas que han sido instruidas en el uso de BabyBed de Kanmed podrán usar el producto.

3 Descripción de los Símbolos

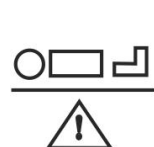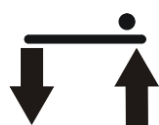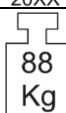	Lea el Manual de usuario antes de comenzar su uso.		
Resorte de Gas Pared lateral	Sustantivos que empiezan con letra mayúscula usualmente se refieren a un producto Kanmed		
BB100 BB400 BB300 BB400F	Estándar BabyBed BabyBed para gemelos BabyBed con el peso fijo BabyBed con el peso fijo para gemelos		
Máximo peso de carga de trabajo seguro permitido:  =10Kg  =42Kg Bandejas de la cama, para todas las versiones: Peso del bebé(s) 10 kg total + colchón(es) de agua, gel u otro tipo, total 10 kg Cajón de almacenaje tapa bajo plataforma de la cama: 2 kg Cajón de almacenaje bajo la plataforma de la cama: 2 kg Rieles laterales alrededor de la cama: Max 3,5 kg en cada riel. Max total 10 kg en todos los rieles juntos.			
	Símbolo en el Pedal de pie para subir o bajar la plataforma de la cama (no para BB300 y BB400T)		
	Símbolo para la función de Tilt, encontrado en la etiqueta de la bandeja de la cama		
	Cumple con MDD 93/42 EEC		
	Punto de conexión de ecualización potencial de tierra		
IP 30	Grado de protección (en caso de ingreso de agua u objetos extraños)		
	Protección grado tipo B (Cuerpo) (no para BB300 / BB400F)		
	Cuando la BabyBed llega al final de su vida útil, debe ser devuelta al distribuidor de reciclaje en acuerdo con EU 2002/96/EC (WEEE) directamente si aplica.		
 20XX	Año de fabricación	 9min/h	Máximo tiempo de uso ininterrumpido en minutos del pilar eléctrico.
	Peso total de la cama cargada con el peso permitido máximo		
	Riesgo de daño en la mano		

4 Instrucciones de Uso General

4.1 Primera Limpieza

La BabyBed de Kanmed y los accesorios vienen limpios de fábrica, pero deben ser limpiados acorde a las normas de su hospital.

Por favor refiérase a sección **Limpieza** antes de usarlos con paciente.

Ver sección 5 para montaje de los paneles etc.

4.2 Revise la Estabilidad

Asegúrese que todos los pernos y tornillos están propiamente apretados y que la cama se siente estable.

4.3 Bajando las Barandas

Las barandas del lado y las frontales se bajan de la siguiente manera:

Use ambas manos y tome las esquinas superiores.


Tire hacia arriba (5 mm, ¼ de pulgada) - tire hacia usted (2 cm, 1 pulgada) - empuje suavemente hacia abajo.

Utilice ambas manos para tirar de los paneles de nuevo - empujar un poco hacia adelante y luego bajarla. Asegúrese de que estén en su lugar

Asegúrese que todas las barandas laterales están moviéndose correctamente y en buena condición.

NOTA: Revise que nada quede atrapado cuando baja o sube las barandas laterales.

NOTA: Sacando las barandas laterales – vea sección **Limpieza**

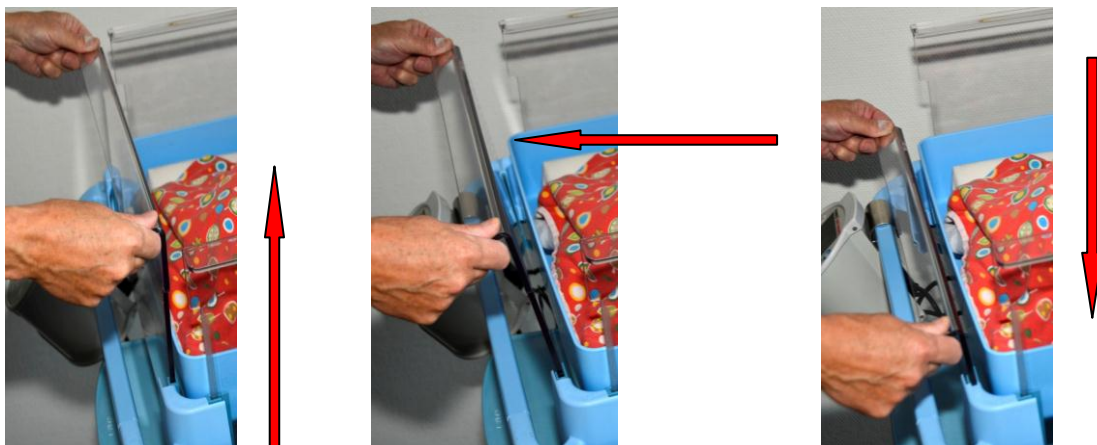

4.4 Moviendo la cama alrededor

Siempre use los rieles laterales para mover la cama.

Advertencia: use una altura baja de la cama cuando la mueva o transporte, especialmente con un bebé en su interior.

NOTA:

- No use las barandas laterales para mover la cama
- No olvide desconectar los cables antes de mover la cama
- Use los frenos de las ruedas cuando la cama no está en movimiento.

4.5 Conectando el BabyBed a la energía eléctrica (no para BB300 y BB400F)

La BabyBed debe estar conectada a una salida de electricidad usando un cable con tierra.

Coloque el cable de modo que nadie se pueda enredar o caer por él.

NOTA: La única forma de desconectar la energía eléctrica es desconectar el cable de la base del pilar o del enchufe de la pared.

ADVERTENCIA: Para evitar cualquier riesgo de shock eléctrico, este equipo debe estar sólo conectado a la red eléctrica principal con protección de tierra.

Coloque la cama de manera que el cable sea fácil de desconectar.



4.6 Ajuste de Altura (no para BB300)

La altura es ajustable presionando el pedal de pie en la base de la rueda.

Conecte la energía eléctrica, suba y baje asegurando que se mueve suavemente sin algún ruido inusual.

El motor puede escucharse lo cual es indicación/advertencia de que la base de la plataforma se esta moviendo.



ADVERTENCIA:

Cuando este cambiando la altura, asegúrese que ninguna persona, cable u otros ítems impidan el movimiento y que ninguno de las cables está atascado envuelto entre el pilar y la base de las ruedas u otro lado. Piensa 2 veces y presiona una vez.

Si los niños, pariente o pacientes están en riesgo por jugar con el pedal de pie, entonces desconecte la energía eléctrica. Asegúrese que la BabyWarmer Kanmed tiene aún tiene energía.


No bloquee los movimientos cuando activen el ajuste de altura eléctrico.

4.7 Movimiento de Tilt o inclinación

Cuando realizamos el movimiento de Tilt de la cama, sostenga las esquinas frontales firmemente con ambas manos y presione el botón de liberación bajo la esquina derecha de arriba.

Libere el botón

El ángulo máximo de Tilt puede estar limitado por un técnico. Revise la sección técnica.

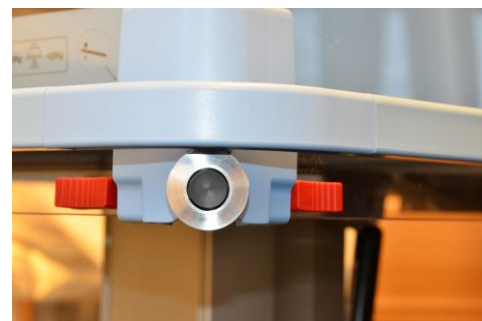

4.8 Arco de la cubierta, Cubierta o manta y colchón

Monte el arco de la cubierta (manta) en la abrazadera lateral. Gírelo a un ángulo de 90° desde la cama y presiónelo hacia Abajo para que los tornillos puedan pasar en la guía.

La cubierta o manta tiene un canal interno.

Pase a través del canal de la cubierta o manta en orden de asegurarla y coloque ambos lados de la manta por el exterior de las barandas laterales.

Coloque el colchón en la cama.



Otros tipos de colchones y cubiertas o mantas hechas a mano Pueden liberar a Kanmed de responsabilidad legal.



4.9 Bandeja del bebé

La bandeja del bebé puede ser fijada a la plataforma o dejarla suelta, dependiendo de lo que usted ordene. Tener la bandeja suelta permite levantarla fácilmente para su limpieza y para limpiar la plataforma también.

En caso que quiera que la bandeja quede permanentemente fija al a plataforma de la cama Kanmed se puede proveer de una cinta especial para este propósito.

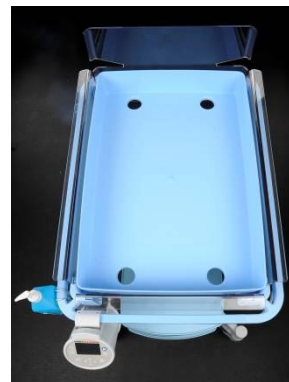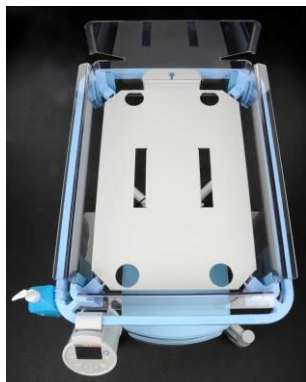

4.10 Cajones de Almacenaje

Los cajones de almacenaje con o sin LID pueden ser montados bajo la plataforma de la cama.

Se pueden mover alrededor para un fácil acceso.

Volver a colocarlo atrás después de su uso.

Respete los límites de carga escritos en el LID y en los gabinetes de almacenaje.



4.11 BabyWarmer Kanmed

La unidad de BabyWarmer Kanmed está colgada de los rieles laterales. Una manilla especial puede reemplazar la manilla existente reduciendo el riesgo que la unidad caiga accidentalmente del riel.

Vea www.kanmed.se o contacte a su distribuidor.

El cable del colchón calentador es preferible colocarlo a través de uno de los agujeros de la bandeja de la cama y ser conectado a la unidad de control.


El Babywarmer Kanmed se conecta a la energía eléctrica por su propio cable o por un cable especial corto (Número de orden 800-0502) que se conecta a la base superior del pilar -vea la foto- Vea el manual de usuario de BabyWarmer Kanmed para mayor información acerca del uso del BabyWarmer Kanmed.



4.12 Barra goteo con brazo

Todas las cunas pueden ser equipadas con un soporte en el extremo posterior (véase el cuadro) que puede contener 2 pies de goteo.

Referencias para pedidos se encuentran en la sección 10

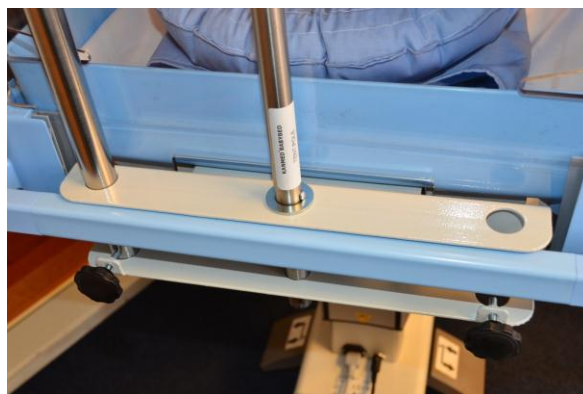

4.13 Otros accesorios


Los accesorios Kanmed están montados de acuerdo a las instrucciones que vienen con las partes. Respecto al límite de peso viene indicado en la sección 3

Adherir otros accesorios necesita una consideración cuidadosa con respecto a los límites de peso, idoneidad, adheridos a la cama, etc.

Kanmed sólo se hará responsable de los accesorios entregados por Kanmed.

Para Kanmed accesorios ver www.kanmed.se o contacte con su distribuidor.

NOTA: Las arboledas en la baranda trasera están hechas para la fijación de tubos.

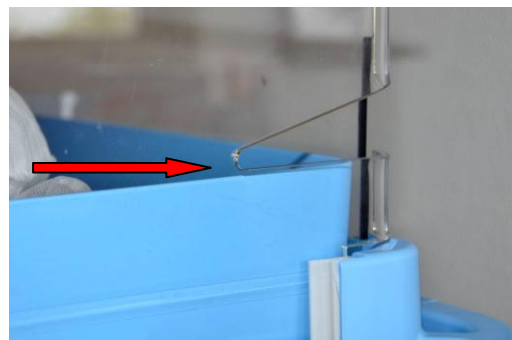

5. Limpieza

Información General

La cama y los accesorios deben ser limpiados cuidadosamente entre paciente y paciente, como mínimo siguiendo las normas establecida por la persona (según comité de infecciones) responsable de la limpieza y desinfección en su departamento del Hospital.

Inspeccione todas las partes por desgaste y resistencia, antes y después de la limpieza.

Abajo hay una lista de agentes recomendados por Kanmed para la limpieza y desinfección. Usar otros agentes y/o exagerar la limpieza máxima reduce la vida útil de algunas de las partes. Contacte a Kanmed con las especificaciones del producto si tiene duda.

Las barandas laterales esta hechas de PET (ECO-AMIGABLE) y soportarán todo tipo de limpieza y fluidos de desinfección.

No use solventes.

Limpieza: Uso jabón con agua.

Desinfección: La BabyBed Kanmed se puede limpiar con los desinfectantes de superficies más comunes de los Hospitales. Toallas de limpieza con Virkon®, Diversey Limpiador Colorado, toallitas de Clinell, toallitas Chior Clean, Meliseptol® rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® Y similares

Si tiene duda pruebe en una superficie pequeña o contacte al distribuidor o a Kanmed.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

5.1 Limpiando la cama

Use paños bien escurridos

NOTA: Kanmed BabyBed NO debe bajo ningún circunstancia mojarse (ducharla) con ningún líquido.

No la limpie en cámaras desinfectantes.

5.2 La Bandeja del Bebé

La bandeja del bebé esta usualmente suelta. Pero puede ser levantada para una fácil limpieza y para limpiar también la plataforma.


5.3 Limpiando las Barandas Laterales

Removiendo las barandas laterales

Si la cuna tiene piezas rojas (ver foto)presionar hacia dentro y levantar el panel

No lave las barandas laterales en el lavavajillas.

No restriegue las barandas laterales con material que pueda arañarlo

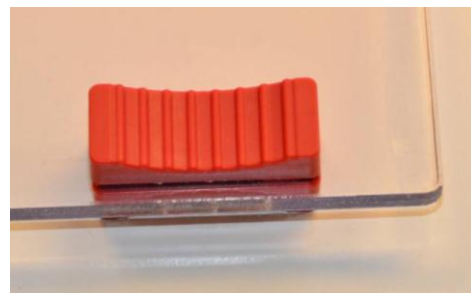

5.4 Limpiando guías de la muralla lateral

Las guías de las murallas laterales pueden ser fácilmente removidas y limpiadas.

Las guías de los paneles están marcadas izquierda L y derecha R

Use un poco de vaselina en el paño para que se deslice bien en la baranda lateral.



5.5 Poniendo las murallas laterales en su lugar.

Insertar las guías de los paneles en la esquinas.

Observar L Izquierda y R derecha.


Colocarlos como en la imagen.

Presione firmemente el pin en la guía hacia el agujero en la esquina.

Inserte las barandas laterales en las arboleadas, vea la flecha, y deslícelo hacia abajo.

Ellos automáticamente se deslizarán/ harán click en el lugar.

Si las barandas laterales no se están deslizando fácilmente se puede agregar un poco de grasa a los bordes de las barandas laterales.

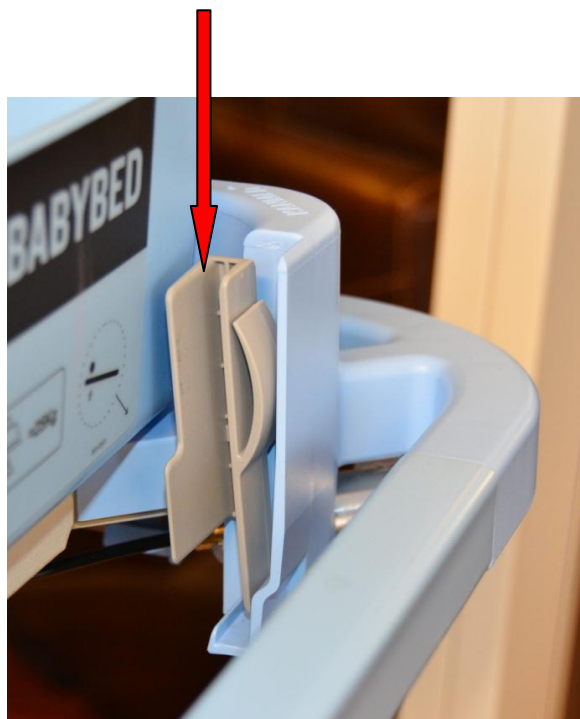**5.6 Cajones de almacenamiento y Tapas**

Los cajones de almacenamiento o tapas se limpian y desinfectan de la misma forma que el resto de la cama.

5.7 Colchones

Use lo agentes recomendados por Kanmed arriba para limpiar y desinfectar.


5.8 Cubierta o Manta

Vea las etiquetas para instrucciones de lavado.

En caso de contaminación la manta puede ser lavada a 90°C pero en este caso puede resultar que se encoja y que se deteriore antes de tiempo.

5.9 Esquina del panel.

Si la esquina del panel no se parece a esto debe contactar con su distribuidor

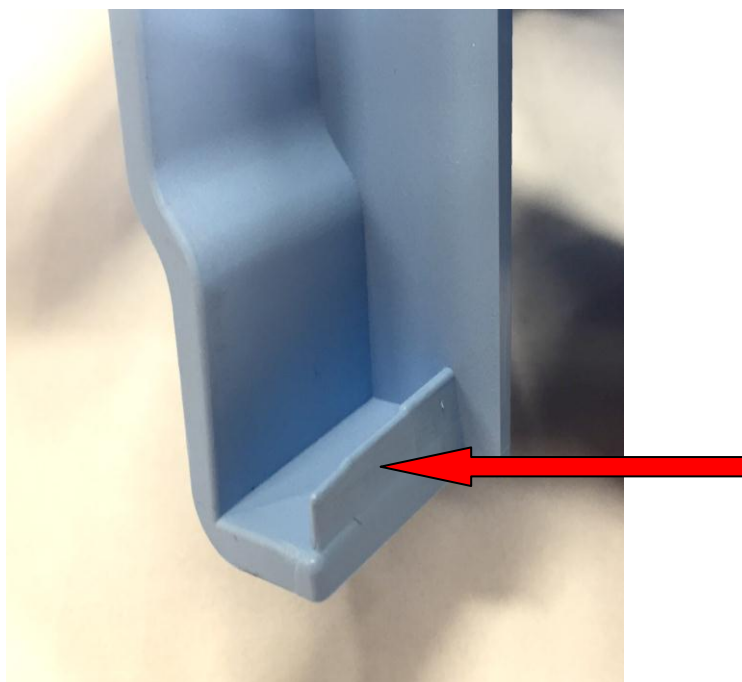

6 Revisiones regulares antes de su uso

General

Asegúrese que todas las partes están en buenas condiciones y que no muestran decoloración o rupturas. Cambie las partes que no están en buenas condiciones.

Adicionalmente es requerido un mantenimiento anual. Vea la sección Técnica.

Recomendaciones y controles antes del uso	Ejecutado Por	Tiempo Agenda	Información adicional
Funcionamiento de las barandas	Usuario	Antes de cada uso	Asegúrese que se mueven arriba y abajo fácilmente y que se bloquean en la posición superior.
Revisión del Tilt o inclinación	Usuario	Antes de cada uso	Asegúrese que se mueve libremente y que bloquea seguro en el ángulo deseado.
Cables y conectores	Usuario	Cada día	Asegúrese que están en buenas condiciones.
Estabilidad e integridad	Usuario	Cada día	Asegúrese que la cama esta en buenas condiciones y estable, además que todas las funciones trabajan correctamente.
Kanmed BabyWarmer	Usuario		Vea el Manual de usuario de BabyWarmer Kanmed
Ruedas/frenos	Usuario	Antes de cada uso	

7 Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Acción
La columna de levantamiento no se mueve como lo deseado. (No para BB300 y BB400F)	No conectado a alimentación eléctrica	Revise los cables Revise la alimentación
	Algo obstruye el movimiento	Revise que nada bloquee
	Conexión eléctrica rota o no conectada apropiadamente.	Servicio Técnico
	Pedal de pie defectuoso o no está conectado el cable	Servicio Técnico
No se puede hacer tilt correctamente en la cama. Se queda atascada en casi todas las posiciones. No mantiene la posición	El control está fuera de orden o necesita ajuste	Servicio Técnico
	Algo está obstruyendo	Revise que nada bloquee
La cama se siente inestable	Tornillos o ruedas sueltas	Servicio Técnico
Ajustes de altura hacen ruidos inusuales		Servicio Técnico
Barandas laterales son difíciles de mover	No está encajado correctamente	Revise por encaje perfecto Agregue grasa
Barandas laterales están atascadas	Guías giran alrededor en forma errónea	Vea sección 5.5

8 Datos Técnicos

	BB100 Estándar BB300 Altura Fija	BB400 Gemelos BB400F Gemelos altura Fija
Dimensiones externas	L850mm Ancho 630 mm	L950 mm Ancho 800 mm
Dimensiones internas de la bandeja de la cama	L690mm Ancho 465 mm Alto 90 mm Hecho de PP	L765mm Ancho 640 mm Alto 90 mm Hecho de PP
Altura desde el piso de la parte de debajo de la bandeja	Min 78 cm Max 108 cm Altura fija es 80 cm	
Peso	Cerca de 46 kg Altura fija cerca 36 kg	Cerca de 52 kg Altura fija cerca 42 kg
Base de ruedas	64 cm x 87 cm	
Ruedas	Diámetro 125 mm con los frenos	
Tilt	Cerca de 17 grados	Cerca de 17 grados
Colchón	Espuma suave recubierta	Espuma suave recubierta
Cubierta o Manta	Lavable 60°C (90°C)	Lavable 60°C (90°C)
Gabinete	L320mm Ancho330mm Alto120mm, Lid 320x330mm	
Colores	Unisex tofos los detalles plásticos son celestes. Ruedas y partes de metal gris claro.	
Voltaje BB100/400	230V 50Hz / 60Hz or 115V 60Hz 70VA	
Fusible BB100/400	2xT6,3A 230V, Sólo reemplace con el mismo tipo y clasificación	
Energía de salida en el pilar BB100 and BB400: Máx 300W		
Protección BB100/400: Clase I		

Modificaciones ADVERTENCIA	Cualquier modificación en la BabyBed Kanmed incluyendo accesorios hechos en casa pueden evitar total responsabilidad de Kanmed y no están permitidas son una aprobación por escrito de Kanmed.
Creando sistemas	Cualquier persona conectando la BabyBed Kanmed a cualquier otro sistema eléctrico principal debe crear un "sistema" de acuerdo a la IEC 60601-1 sección 16, y debe estar calificada para evaluar cualquier circunstancias que puedan dañar al staff, pacientes y equipamiento.
Tiempo de vida esperado	Kanmed garantiza la vida útil por 10 años desde el primer día de uso. Esto es bajo las condiciones que BabtBed Kanmed ha sido atendida de acuerdo con el manual de usuario y servicio y que la unidad no ha sido modificada o cambiada en ninguna forma o por cualquier razón.

Producto con certificación CE.

Conforme a UL 60601-1

Datos ambientales

En uso: +10 to + 40°C, <85% RH

Transporte: -20 to +60°C, no condensando.

Almacenaje: +10 to +40°C, no condensando.

Presión atmosférica: 70 to 106 kPa

9 Sección Técnica - Servicio y Mantenimiento

NOTA: Todos los repuestos usados para reemplazar o reparar deben ser suministrados por Kanmed o por su distribuidor autorizado. El uso de "Partes no permitidas por Kanmed" automáticamente reasignarán todas las responsabilidades de seguridad al hospital. Sólo cuando el personal, ingeniero biomédico o equivalente, debe realizar esta reparación. No haga ninguna reparación con el paciente en la cama.

9.1 Revisión Anual/ Mantenimiento

Revise las siguientes pruebas al menos una vez al año:

- Que los cables y conectores estén libres de defectos.
- Revise que las barandas no estén trizadas o dañadas
- Revise las esquinas- que no hayan grietas en los plásticos, tornillos muy apretados? Use, tornillos plásticos especiales.
- Revise las guías de las barandas
- Revise que las barandas bajen y suban sin problemas siendo fácilmente movidas.
- Revise que el control del pilar del pedal de pie responde sin retrasos, que la función de subir y bajar funcionan correctamente y que no hace un ruido inusual cuando opera y que el cable esta sin daño.
- Revise que la función tilt funcione correctamente. No debe hacer ningún ruido.
- Revise que el cable del resorte de gas y la manilla del tilt no estén dañados.
- Revise que las ruedas están apretadas suficientemente al stand y que no este dañado en ninguna parte, que giren sin ruido, y que la rueda que tiene freno funcione apropiadamente.
- Revise que todos los tornillos están apretados apropiadamente, especialmente los tornillos que conectan el ajuste de altura del Pilar a la base de las ruedas, los tornillos en la parte de arriba del pilar, los tornillos que sujetan la plataforma de la cama y el resorte del gas.
- Revise que la etiqueta del pedal de pie no este usadas.
- Revise que las etiquetas de las bandejas de la cama no estén usadas

Servicio

NOTA

Siempre desconecte el poder eléctrico antes de realizar alguna reparación en la BabyBed. Siempre realice una prueba completa de funcionamiento después de las reparaciones.

9.2 Ajustando de la función del Tilt / Resorte de Gas

Si la cuna tiene la liberación de inclinación mecánica ver la versión 1 de este manual para más información. Disponible en www.kanmed.se.

La actualización de inclinación hidraulica es sencilla de realizar – contactar con su distribuidor.

Al pulsar se activa el perno de liberación ubicado en la parte superior del resorte de gas en la cabeza de liberación. Si la inclinación no se mueve o no se bloquea por el resorte de gas, se debe ajustar la función. Suelte el pistón de gas del soporte en el pilar y suelte la tuerca de bloqueo para liberarlo (ver foto)

No se mueve la inclinación: Girar una vuelta el resorte de gas - inserte pistón de gas en el soporte y empuje en el perno. Probar que se mueve libremente y se bloquea con seguridad cuando se suelta el boton.

La inclinación no se bloquea: Girar el resorte de gas y probar. Haga una verificación final y entonces apriete los pernos y la tuerca de bloqueo.



9.2.1 Ajustando el límite del Tilt.

El tilt o la inclinación pueden ser limitado moviendo la abrazadera del resorte de gas en el pilar. Asegúrese de apretarlo apropiadamente.

9.3 Cambiando o ajustando el Riel lateral o Esquina.

Vea la lista de repuestos para ver el número de parte. Las esquinas de los rieles laterales están atornilladas desde la parte de abajo con dos (2) tornillos plásticos especiales en cada esquina. Los agujeros en las camas son ovales permitiendo un ajuste apretado de los rieles laterales. Se pueden remover los dos tornillos de las esquinas para colocar las nuevas esquineras o rieles laterales.

No use otros tornillos que no sean los de Kanmed part nº 700-0880 porque no tendrán el mismo poder de sostenimiento. Los tornillos pueden ser puestos y sacados cerca de 6 veces en el mismo agujero plástico.

9.4 Colocando, removiendo o ajustando cajoneras

Soltando los tornillos que sostienen las cajoneras. Muévelo a la nueva posición y apriete los tornillos apropiadamente.

Para remover o añadir una cajonera extra: suba el pilar más de 5 cm. Presione bajo el marco de plástico negro que va alrededor de la parte de abajo del pilar. Ahora puede remover los pins de los pernos o añadir los pins de los pernos

Cuando se añaden cajoneras asegúrese que la baranda frontal puede ser bajada suficientemente.

NOTA: Los pins de aluminio deben ser insertados a través de la cajonera antes de apretarlos en la abrazadera.

9.5 Cambiando el pedal de pie / conexiones eléctricas

Acueste la cama de lado cuidadosamente. Desenchufe el pedal del pilar. Desatornille el pedal de pie y reemplácelo. Suba la cama y revise su funcionamiento y que las flechas de arriba/abajo están indicando correctamente.

9.6 Cambiando el Pilar

Suba el pilar eléctricamente cerca de 5 cm si es posible.

Desconecte la energía eléctrica.

Vacíe la cama y remueva las barandas laterales y la bandeja del bebé.

Remueva las cajoneras. Presione el marco plástico en la parte de abajo del pilar abajo. Saque las cintas plásticas para que pueda remover los pins de metal que sostienen los accesorios del pilar. Si el pilar no se puede mover entonces tendrá que ordenar nuevos pins de metal.

Remueva el resorte de gas del pilar como también su abrazadera.

Soltando los pernos que sostienen la plataforma. No olvide el cable a tierra.

Soltando los pernos en la parte superior del pilar para remover la abrazadera de la cama.

Observe que el cable de tierra esté en la parte de abajo.

Desconecte el control de altura.

Gire el pilar/cama hacia arriba y abajo.

Desatornille el potencial de tierra en las conexiones.

Remueva el cable de protección de tierra bajo la cama.

Soltando los tornillos bajo la base de las ruedas y remueva el pedal de pie.

Desatornille el pilar. Observe el cable a tierra.

Para ensamblar, haga las instrucciones en orden inverso.

Haga una revisión de conexión completa y de pruebas de seguridad eléctrica para asegurar que la plataforma está con toma de tierra apropiadamente.

10 Repuestos/Accesorios

Nº de Parte	Descripción	Remark
800-0077	Baranda lateral izquierda/derecha BB100/BB300	23 cm altura.
800-0076	Baranda lateral frente BB100/BB300	23 cm altura.
800-0010	Baranda lateral respaldo BB100/BB300	23 cm altura, surcos para tubos
800-0079	Baranda lateral izquierda/derecha BB400/400F	23 cm altura.
800-0078	Baranda lateral frente BB400/400F	23 cm altura.
800-0042	Baranda lateral respaldo BB400/400F	23 cm altura, surcos para tubos
800-0072	Topes rojos	Set de 4
800-0074	Guía baranda lateral lado izquierdo	Set de 4
800-0073	Guía baranda lateral lado derecho	Set de 4
800-0023	Riel lateral frente/respaldo BB100/BB300	Largo 40 cm
800-0022	Riel lateral lados BB100/BB300	Largo 62 cm
800-0044	Riel lateral frente/respaldo BB400/BB400F	Largo 57,7 cm
800-0045	Riel lateral de los lados BB400/BB400F	Largo 72,3 cm
800-0011	Esquina para el riel lateral, para todos los modelos	
700-0880	Tornillos para la abrazadera de la esquina	Use sólo estos tornillos especiales
BB155	Colchón BB100/BB300 68 cm x 46 cm	Espuma cubierta de plástico
BB450	Colchón BB400/BB400F 76 cm x 64 cm	Espuma cubierta de plástico
800-0004	Bandeja de bebé BB100/BB300	
800-0041	Bandeja de Bebé BB400/BB400F	
800-0002	Cajonera	
800-0013	Sostenedor de cajonera	Incluye el set de pin de pernos y los tornillos
800-0001	Lid de cajonera	
BB171	Sostenedor de botella	No disponible aún
800-0065	Abrazadera para los rieles DIN (cabén en rieles laterales)	No disponible aún
800-0020	Arco para cubierta o manta	
800-0057	Abrazadera/manilla para BW3	
800-0502	Cable especial de electricidad para BabyWarmer	Largo 80-100 cm
800-0003	Cubierta superior de las ruedas	
BB160	Manta para BB100 / BB300	Por favor revise con su proveedor local o en la página web de KANMED www.kanmed.se Para colores disponibles
BB460	Manta para BB400/400F	
800-0501	Pedal de pie con cable	
800-0029	Perno pin para accesorios (estos son para ser enroscados en el pilar)	Dia 7 mm, L 30 mm Tornillos M5. Incluye los tornillos. Set de 2
800-0503	Etiqueta para bandeja de la cama	
800-0501	Etiqueta para pedal de pie	

NOTA: Otros accesorios o repuestos pueden estar disponibles. Por favor revisar con su proveedor local o en la página web de Kanmed www.kanmed.se Por favor contacte

11 Declaración de Garantía

KANMED garantiza al comprador que la BabyBed Kanmed está libre de defectos de materiales y problemas de armado por un período de 24 meses desde el envío. La garantía no aplica a partes plásticas, colchones y mantas.

La única obligación de Kanmed con respecto a cualquier defecto está limitado a ser reparado por uno nuevo o rehacer la parte o , según discreción de KANMED, reemplazo del equipo o devolución del dinero de la compra.

Esta garantía no estará cubierta si el producto fue modificado, ajustado o reparado por otro, que no sea personal autorizado por KANMED o si hay modificaciones, ajustes o reparaciones que no están en concordancia con las instrucciones provistas por escrito por KANMED. Tampoco será efectiva la garantía si el equipo ha sido mal usado, hubo negligencia o accidente.

Estas garantías están hechas bajo la condición de notificación pronta del defecto encontrado a KANMED o a su autorizado distribuidor antes del período de garantía.

KANMED podrá tener el derecho de determinar si existe si existe el defecto.

KANMED en ningún caso se hará responsable de los daños o consecuencias especiales que estén fuera de la época de garantía, período del contrato, negligencia o cualquier otra teoría legal.

12 Guía-Líneas de Compatibilidad Electromagnética

La BabyBed cumple con todos los requerimientos aplicables de IEC 60601-1-2:2007 de compatibilidad electromagnética (EMC).

La BabyBed debe ser usada en ambientes hospitalarios, pero no cerca de equipamiento quirúrgico HF o cámaras RM.

ADVERTENCIA: el uso de otros accesorios o cables que no han sido especificados o provistos por el fabricante de este equipo puede incrementar las emisiones electromagnéticas o bajar la inmunidad electromagnética que tiene el equipo y resultar en una operación impropia.

ADVERTENCIA: equipos de comunicación portables RF (ej. teléfonos móviles, transmisores de radio, antenas de cables y antenas externas) no deben ser usadas a menos de 30 cm (12 pulgadas) a cualquier parte del BabyBed, incluyendo cables especificados por el fabricante. De otra manera, podría resultar la degradación del desempeño de este equipo.

NOTA: Las emisiones características de estos equipos, hace que estén hechos para su uso en áreas industriales y Hospitales (CISPR 11 clase A). Si es usado en un sector residencial (para lo cual CISPR 11 clase B es normalmente requerido) este equipo puede no ofrecer una adecuada protección a los servicios de comunicación de radiofrecuencia. El usuario puede necesitar tomar medidas de mitigación, tales como reubicar o reorientar el equipamiento.

Para más información acerca de CEM, cumplimiento con las especificaciones de las emisiones, el estándar de inmunidad, niveles de prueba, etc. Por favor contacte a KANMED.

13 Desechable



Cuando la BabyBed Kanmed ha llegado al final de su vida útil, debe ser reciclado en acuerdo con EU 2002/96/EC (WEEE) directamente si es aplicable

KANMED°BABYBED



Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden

Teléfono +46 8 56 48 06 30
Fax +46 8 56 48 06 39

E-Mail: info@kanmed.se
Página web: www.kanmed.se

Distribuido por: